

**Produto:** Curativo de Fixação IV M-TEC



**Descrição:** Curativo de filme de poliuretano (PU) transparente com sistema de moldura para facilitar a aplicação do curativo e adesivo hipoalergênico. Estéril.

- Super fino e transparente.
- Com 2 tiras adicionais de não tecido para maximizar a fixação e a segurança do dispositivo IV.
- Com tira de não tecido (bege) para identificação do paciente e data de aplicação.
- Reduz riscos de infecção, pois o filme de poliuretano é à prova d'água, à prova de bactérias e à prova de vírus.
- Transparente: possibilita a visualização do local da punção do IV.
- Fenestra em forma de U para facilitar a fixação de cateteres e cânulas.
- Curativo respirável, evitando a maceração da pele.
- Adesivo sensível à pressão hipoalergênico, com boas propriedades de adesão e não deixa resíduos na remoção.
- O curativo possui sistema de aplicação estilo moldura para facilitar o manuseio.
- Macio e adaptável.

**Indicação:** Os Curativos de Fixação IV M-TEC são indicados para fixação de dispositivos intravenosos: cateter para hemodiálise, acesso venoso, acesso central, cateter peridural, cateter diálise.

**Registro ANVISA N°:** 80003300031.

**Composição:** Composto por uma película de poliuretano (PU) transparente com uma camada adesiva acrílica hipoalergênica, protegidos por um papel siliconizado, e uma borda de não tecido de viscose. O curativo possui na parte externa uma camada de papel que atua como um sistema de fácil aplicação do filme (retirado assim que o curativo é aplicado) e tiras de não tecido para auxiliar na fixação do cateter e identificação do paciente e data da aplicação. Isento de látex.

**Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Manter em temperatura entre 0°C e 40°C.

**Precauções e Advertências:** Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e / ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.


### Instruções de Uso:

1. Abrir o envelope individual de forma asséptica e retirar a janela de papel central do curativo;
2. Em caso de fixação de uma cânula, retirar as tiras de fixação e fixar em abas da cânula de ambos os lados;
3. Retirar a aba maior, expondo a superfície adesiva; em seguida, centralizar cuidadosamente a área transparente do curativo sobre o local de aplicação, para que a frestura em forma de U fixe o cateter ou a cânula e o outro lado do curativo cubra o suporte de plástico da cânula/cateter;
4. Retirar a aba menor da região adesiva do curativo, em seguida, retirar lentamente a moldura de papel ao mesmo tempo que alisa as laterais;
5. Em caso de fixação de um cateter, retirar as tiras de fixação da película de proteção e colocar sobre o curativo, seguindo o protocolo local;
6. Registrar os dados do paciente na tira colorida (se existente);

### Como aplicar o curativo 6,5cm x 7,0cm



### Como aplicar o curativo 10cm x 12cm

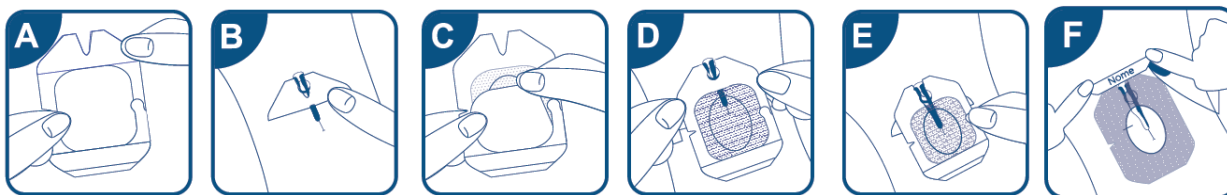

### Características da Qualidade:

| Características        | Métodos | Valores |
|------------------------|---------|---------|
| Adesão (180°) (N/25mm) | 05-011  | 8±2     |
| MVTR (g/m² / 24h)      | 05-050  | 700±200 |

**Validade:** 05 anos a partir da data de fabricação.

Produto Estéril por Óxido de Etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

**Apresentação / Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

| Cód. Venda | DESCRIÇÃO DO ITEM                                         | DIMENSÃO        | EMBALAGEM PRIMÁRIA  | EMBALAGEM SECUNDÁRIA     | EMBALAGEM DE TRANSPORTE |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| PA.1416    | Curativo de Fixação IV M-TEC 6,5x7cm Cartucho c/ 50UN     | 6,5cm x 7,0cm   | Envoltório de papel | Cartucho de papel cartão | Caixa de papelão        |
| PA.1417    | Curativo De Fixação IV M-TEC 10cm X 12cm Cartucho c/ 50un | 10,0cm x 12,0cm | Envoltório de papel | Cartucho de papel cartão | Caixa de papelão        |

**Apresentação comercial:**

| Cód. Venda | Descrição do item                                         | Curativos/ Cartucho | Cartucho/ Caixa de Embarque | Cód. Barras EAN 13 | Cód. Barras DUN 14 |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                           |                     |                             | Cartucho           | Caixa de Embarque  |
| PA.1416    | Curativo de Fixação IV M-TEC 6,5x7cm Cartucho c/ 50UN     | 50                  | 24                          | 7896544902756      | 17896544902753     |
| PA.1417    | Curativo De Fixação IV M-TEC 10cm X 12cm Cartucho c/ 50un | 50                  | 24                          | 7896544926615      | 17896544926612     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Elaboração:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data: __/__/__ | Aprovação:                                                                                                                                                                                      | Data: __/__/__ |
|  <p>Documento assinado digitalmente<br/>                 JULIANA ORZECOWSKI<br/>                 Data: 22/04/2026 11:31:52-0300<br/>                 Verifique em <a href="https://validar.it.gov.br">https://validar.it.gov.br</a></p> |                | <p>DIONEY<br/>                 NEVES:03601649942</p> <p>Assinado de forma digital por<br/>                 DIONEY NEVES:03601649942<br/>                 Dados: 2026.04.24 08:32:44 -03'00'</p> |                |